

NM-2500



Руководство пользователя

Благодарим за покупку!
Перед использованием полностью прочтите данное
руководство и ознакомьтесь с правилами безопасной
эксплуатации изделия.

Гарантийный талон прилагается

Изделие из турмания

Содержание

Меры предосторожности

Знакомство с изделием

Комплектация	8
Основные части изделия и их функции	9
Пульт управления изделием	10

Использование изделия

Порядок подготовки и использования изделия	14
Техника безопасности при чрезвычайных ситуациях ...	17

Правила хранения и ухода за изделием

Хранение и уход за изделием после использования	20
Пункты самопроверки	21
Прежде чем обратиться в сервисный центр	22
Возможные неисправности	23
Параметры изделия	24
Гарантийный талон	25

Меры предосторожности

- Внимательно прочтайте содержание данного раздела руководства.
- Указанная информация необходима для безопасности пользователя и предотвращения имущественного ущерба.
- В данном руководстве уровень опасности классифицируется на 3 категории. Дальнейшие обозначения помогут разобраться, что может вызвать опасность или требует внимания в обращении.

Обозначения



Опасность

Серьезная угроза здоровью или жизни пользователя в случае нарушения указанных требований.



Предупреждение

Возможны тяжелые травмы или угроза жизни в случае нарушения указанных требований.



Внимание

Возможны незначительные травмы или повреждение имущества в случае нарушения указанных требований.

Примечания

- Производитель изделия, импортер и продавец не несут ответственность за поломки и разного рода ущербы, возникающие из-за неосторожной эксплуатации, невнимательности при использовании или неправильного ухода за оборудованием со стороны пользователя.
- Руководство составлено на базе спецификации данной модели. Производитель продолжает совершенствование изделия и доработку его функций, что означает модификацию определенных характеристик в будущих моделях и разработку соответствующего руководства. Все изменения осуществляются без предупреждения пользователя.



Опасность




При использовании не сгибайте изделие слишком сильно. Храните в развернутом виде.




Во избежание поломок изделия и возгорания не подключайте к одному источнику питания несколько электроприборов одновременно.



Не используйте продукцию в других целях, кроме указанных.

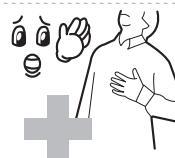

При наличии электрокардиостимулятора перед использованием изделия обязательно проконсультируйтесь с врачом.

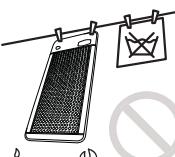

Во избежание поломок изделия и поражения электрическим током не стирайте и не сдавайте изделие в химчистку.



Строго запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или модернизировать изделие. В случае необходимости ремонта обратитесь в филиал продаж или сервисный центр.



Предупреждение



Не допускайте использование оборудования несовершеннолетними детьми без присмотра взрослого.



Запрещается кидать и трясти изделие, а также ставить на него тяжелые предметы. Рекомендуется беречь прибор от ударов и любых воздействий, которые могут нанести повреждение.



Не кладите пульт управления под одеяло во время использования изделия (это может стать причиной поломки или возникновения пожара). Используйте турманиевый мат, накрыв его полностью одеялом для предотвращения сосредоточения тепла в одном месте.



Не перекручивайте и не перегибайте чрезмерно шнур питания, не пережимайте и не придавливайте тяжелыми предметами.



Не используйте части изделия от других моделей или других производителей.



Не ставьте на изделие зажженные свечи и сигареты, спиртное, электроприборы и любые легковоспламеняющиеся вещества или предметы, а также емкости с водой.



Внимание




Соблюдайте время и метод использования.



Если вы не используете изделие в течение длительного времени, не забудьте вынуть шнур питания из розетки.



Не кладите на изделие колющие и режущие предметы.

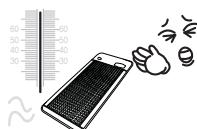

Во избежание ожогов используйте изделие в оптимальном температурном режиме (40~50°C).




Избегайте попадания прямых солнечных лучей.



При подключении оборудования к электросети убедитесь, что его рабочее напряжение совпадает с напряжением в сети. Подсоединяйте только в заземленное штепсельное гнездо.

NM-2500

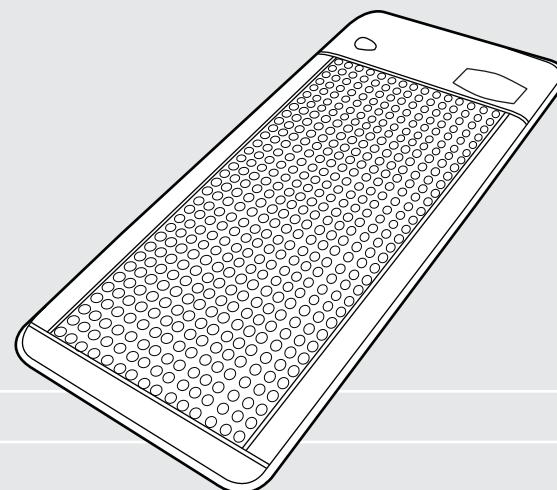

Знакомство с изделием

Комплектация	8
Основные части изделия и их функции	9
Пульт управления изделием	10

Комплектация


Инструкция

Перед установкой изделия обязательно проверьте наличие всех комплектующих. При обнаружении нехватки или повреждения деталей обратитесь к продавцу.
В целях повышения эффективности изделия дизайн или часть характеристик могут быть изменены.



Наименование	Функции
① Шнур электропитания	Подключается к розетке, обеспечивает соединение с источником питания.
② Коннектор	Соединяет пульт управления с основным изделием.
③ Гнездо подсоединения пульта управления	Соединяет пульт управления с основным изделием, обеспечивает обмен сигналами с электропитанием.
④ Пульт управления	Регулирует температуру нагревательной поверхности.
⑤ Нагревательная поверхность	Обеспечивает термоэффект.


Пульт управления изделием

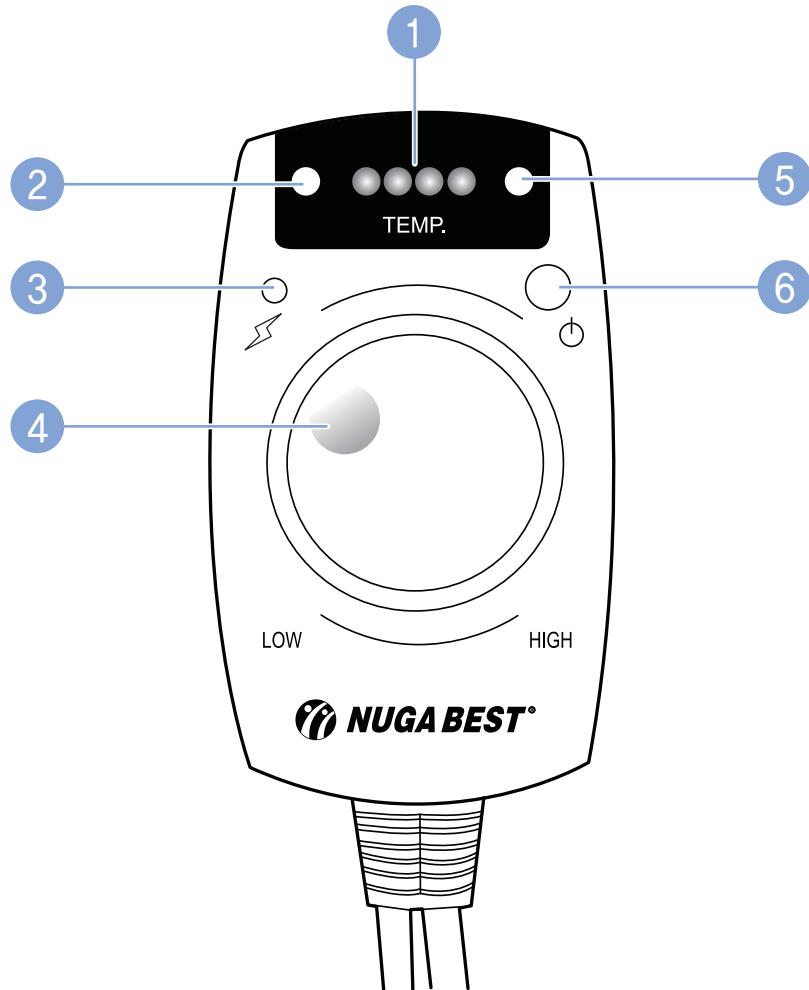

Наименование	Функции
① Температурный дисплей	Позволяет определить температурный режим изделия и информирует о неисправностях.
② Индикатор электромагнитных волн	Информирует о наличии вблизи электромагнитных волн (при обнаружении загорается на 3 секунды).
③ Терминал обнаружения электромагнитных волн	Если дотронуться до терминала, устройство автоматически начнет поиск электромагнитных волн (в случае их обнаружения загорается индикатор).
④ Регулятор температуры	Позволяет установить нужную температуру изделия и регулировать ее в сторону понижения или повышения.
⑤ Индикатор работы	Позволяет определить рабочее состояние изделия (включено/выключено).
⑥ Кнопка питания	Выполняет функцию включения / выключения электропитания изделия.

Заметки

NM-2500

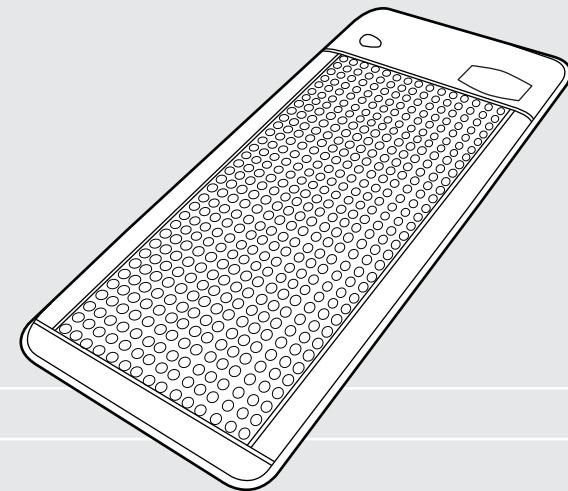



Использование изделия

Порядок подготовки и использования изделия	14
Техника безопасности при чрезвычайных ситуациях	17

Порядок подготовки и использования изделия

i Перед использованием ознакомьтесь с порядком работы изделия


Порядок работы изделия

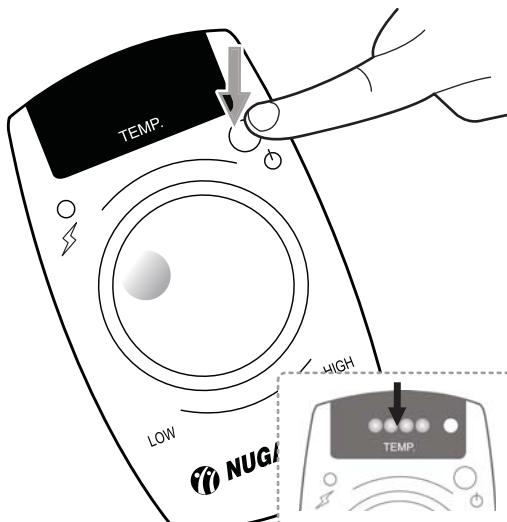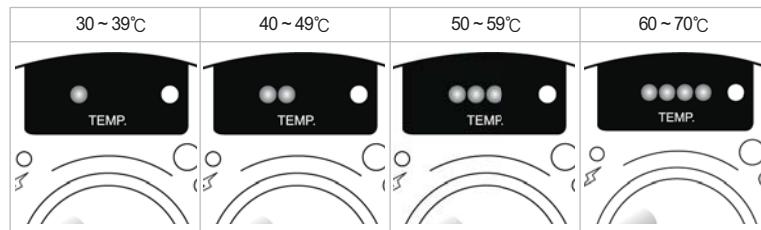

Шаг. 1

Подключите шнур электропитания к розетке.

Нажмите кнопку питания изделия и убедитесь, что аппарат работает (в этом случае на температурном дисплее появится сигнал, и загорится индикатор работы).

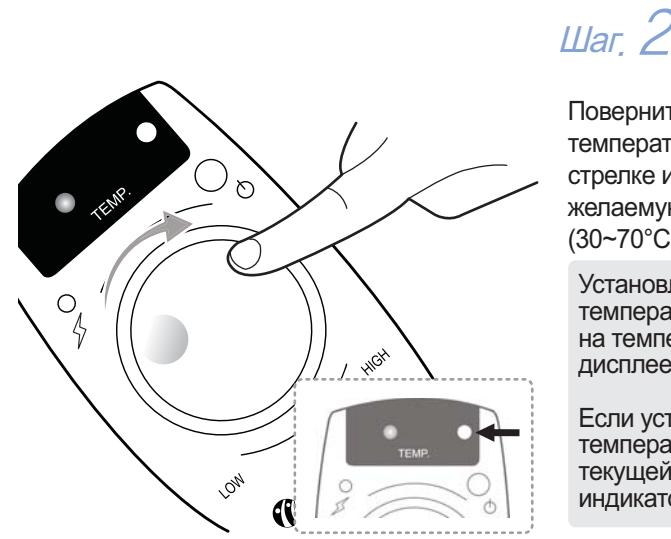


Шаг. 2

Поверните регулятор температуры по часовой стрелке и установите желаемую температуру (30~70°C).

Установленная температура отобразится на температурном дисплее.


Если установленная температура выше текущей, то загорается индикатор работы.

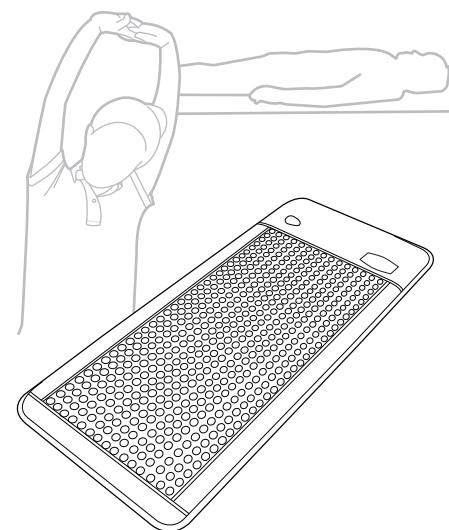

Шаг. 3

После установки температуры изделие готово к применению.


Техника безопасности при чрезвычайных ситуациях

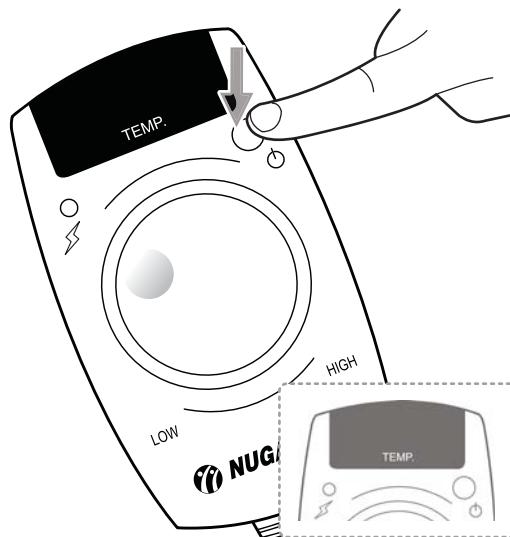

Шаг. 4

После окончания использования отключите изделие нажатием кнопки питания.

При этом температурный дисплей и все индикаторы должны погаснуть.


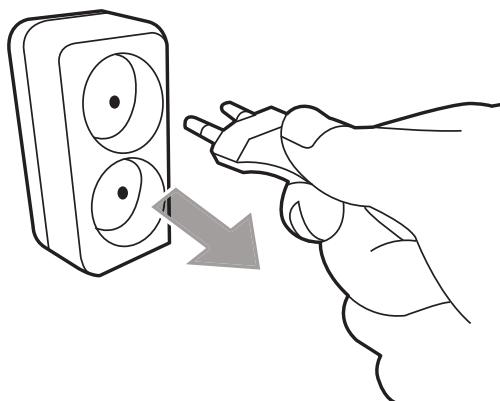


Шаг. 5

После окончания использования обязательно разъедините вилку с розеткой.

Инструкция

Через 12 часов изделие автоматически выключается.

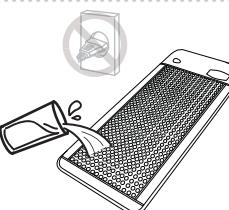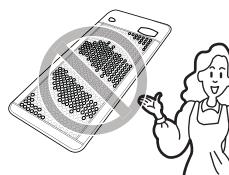

При появлении искры сразу же прекратите использование и выньте шнур питания из розетки.

При появлении запаха гари или дыма немедленно прекратите использование и обратитесь в филиал продаж или сервисный центр.


При появлении расстройств в организме немедленно прекратите использование изделия и проконсультируйтесь с врачом.

При обнаружении поломки или сбоя питания немедленно отключите изделие нажатием кнопки питания и обратитесь в филиал продаж или сервисный центр.

В случае попадания воды на изделие немедленно отключите его нажатием кнопки питания, выньте шнур питания из розетки и обратитесь в офис продаж или сервисный центр.

Заметки

NM-2500

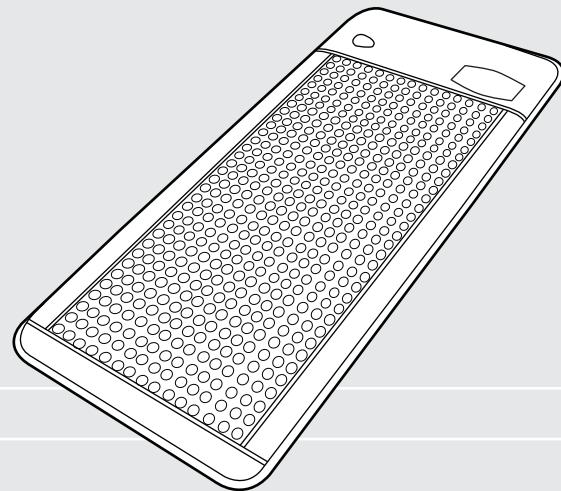

Правила хранения и ухода за изделием

Хранение и уход за изделием	
после использования	20
Пункты самопроверки	21
Прежде чем обратиться в сервисный центр	22
Возможные неисправности	23
Параметры изделия	24
Гарантийный талон	25

Хранение и уход за изделием после использования

Пункты самопроверки

Инструкция

- Если изделие не используется длительное время, необходимо отключить его и вынуть шнур питания из розетки.
- Условия хранения.**
 - Хранить в сухом помещении, удаленном от источников воды и влажности.
 - Хранить в месте, защищенном от прямого воздействия природных явлений (перепады температуры и атмосферного давления; сквозняк; прямые солнечные лучи; пыль и т.д.).
 - Изделие должно быть защищено от вибрации, ударов, падений и т.п.
 - Запрещается устанавливать в местах хранения химических веществ, образования газа и т.п.
 - Комплектующие хранить в чистом сухом месте.

Требования к окружающим условиям

- В момент использования температура воздуха в помещении: 0~35°C; влажность: 20~80%.
- Хранить при температуре: -25~70°C; влажности: 20~80%; атмосферном давлении: от 700 до 1060 гПа.

Правила ухода за изделием



Внимание

Перед чисткой изделия обязательно выключите его и выньте шнур питания из розетки.



Пульт управления
Протирать сухой тряпкой.

Рабочая поверхность маты
Легкими движениями протирать сухой тряпкой.

Чехол маты
Протирать сухой тряпкой или специальным воском для изделий из кожи.



Внимание

Перед использованием обязательно проверьте нижеследующие пункты, в противном случае существует опасность поломки изделия, возгорания или получения травмы.

Контрольный список для проверки перед использованием

- Подсоединен ли шнур питания к розетке? Да Нет
- Появился ли указатель температуры на температурном дисплее? Да Нет
- Свободно ли регулируется температура? Да Нет
- Не слишком ли высока температура изделия? Да Нет
- В каком состоянии находится кабель питания и другие провода? Нет ли повреждений? Да Нет

Контрольный список для проверки после использования

- Работает ли автоматическое отключение питания изделия по истечении 12 часов? Да Нет
- Погас ли температурный дисплей? Да Нет
- Отсоединен ли шнур питания от розетки? Да Нет
- Убедитесь, что соблюдены все правила хранения изделия. Да Нет

Прежде чем обратиться в сервисный центр

Возможные неисправности



Внимание

В случае обнаружения неисправностей, прежде чем обратиться в сервисный центр, обязательно проверьте нижеперечисленные пункты.

Изделие необходимо использовать согласно инструкции, в противном случае оно может не работать даже в отсутствие поломок.

Пункты проверки при неисправности питания (лампа питания не горит)

Если на температурном дисплее не отображается текущая температура

- ① Убедитесь, что шнур питания подключен правильно.
- ② Убедитесь, что пульт управления включен.
- ③ Проверьте рабочее напряжение.

Пункты проверки при неисправности нагревания (изделие не нагревается)

Если изделие не нагревается


- ① Убедитесь, что пульт управления включен.
- ② Убедитесь, что установлена не слишком низкая температура.
- ③ Стого запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие. В случае необходимости ремонта обратитесь в филиал продаж или сервисный центр.



Внимание


При возникновении ошибки запрещается разбирать изделие. Отключите изделие, выньте шнур питания из розетки и обратитесь в филиал продаж или сервисный центр.

Обозначение ошибки | Расшифровка обозначения | Место отображения

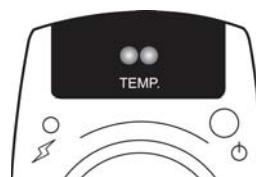

Разъединение температурного сенсора:
• температурный сенсор не обнаружен.

Температурный дисплей, индикатор работы.

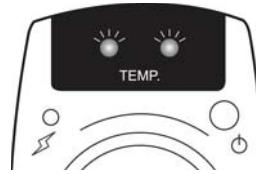

Короткое замыкание температурного сенсора или перегрев (температура превышает 85°C).
• Мигание каждые 0.5сек

Температурный дисплей, индикатор работы.

Параметры изделия

Наименование и тип изделия	Персональный тепловой стимулятор NM-2500
Производитель	(АО) Нуга Медикал Сан 2-1, Гагок-ри, Джиджеонг-мъеон, Вонджу-си, Гангвон-до, Корея
Номер лицензии на производство	№ 1478
Номер лицензии на тип изделия	Номер сертификата: 10-255
Дата производства / номер производства	Обозначения на изделии
Вес изделия	11.55 кг
Технические характеристики	1900 X 800 X 40 (mm)
Меры предосторожности при использовании	См. руководство пользователя
Способы применения	См. руководство пользователя
Цели применения	Смягчение болей
Электрические параметры	AC 220–240V~, 50–60Hz
Потребляемая мощность	220 W
Степень защиты от поражения электрическим током	Монтажная часть Класс 2, тип BF  

Данное изделие является медицинским оборудованием

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Производитель	Наименование продукта	Производственный номер	Модель
	Гарантийный период		
Покупатель	Место приобретения		телефон
	ФИО		телефон
Покупатель	Номер покупателя		

* Пожалуйста сохраняйте гарантийный талон.

Вы можете получить обслуживание только при предоставлении гарантийного талона с указанием даты и места приобретения.

* NUGA MEDICAL CO.,LTD. обеспечивает гарантию на указанное изделие в соответствии с Законом о защите прав потребителей.

* В случае неисправности обратитесь по месту приобретения или к ближайшему дистрибутору NUGA MEDICAL CO.,LTD.

* NUGA MEDICAL CO.,LTD. обязуется осуществлять обеспечение запчастями указанного изделия в течение трех лет с момента окончания его производства.

* Покупая продукцию, убедитесь, что в талоне указан адрес приобретения.

1. NUGA MEDICAL CO.,LTD. гарантирует качество изделия в течение двух лет с момента приобретения.

Вы можете получить бесплатное гарантийное обслуживание в случае соблюдения правил эксплуатации.

2. Гарантийный период назначается с момента приобретения. Удостоверьтесь, что в гарантийном талоне проставлена дата приобретения. В случае отсутствия документов, подтверждающих приобретение, гарантийный срок начинается через 6 месяцев со дня изготовления изделия.

3. Если изделие, предназначенное для личного (домашнего) применения, используется в коммерческих целях (бизнес) или в ненадлежащих условиях эксплуатации, а также в промышленном производстве, то срок гарантии сокращается до шести месяцев с момента приобретения (включая основные детали).

4. Гарантия не имеет силы, если гарантийный талон утерян или испорчен.

Бесплатное гарантийное обслуживание не обеспечивается в следующих случаях:

- Если неисправность наступила в результате форс-мажорных обстоятельств (пожар, землетрясение, ураган, наводнение и т.д.).

* В случае износа запчастей в результате использования.

- В результате использования электропитания, отличного от указанного в спецификации изделия, либо в результате повреждения соединительных проводов.

* Если неисправность явилась следствием внешнего воздействия, а не результатом брака изделия.

- Если неисправность произошла по причине ремонта или попытки модификации изделия кем-то, кто не является представителем дистрибутора или техником службы поддержки NUGA MEDICAL CO.,LTD.

 **NUGA MEDICAL CO.,LTD.**

www.nuga.kr

Сан 2-1, Гагок-ри, Джиджеонг-мъеон,
Вонджу-си, Гангвон-до, Корея

TEL.: +82-33-730-0001 / ФАКС: +82-33-730-0007

Заметки

Заметки